


IV Stand Faible gravité

Modèle à 1 main / usage intensif

I-LOW014

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaine d'application	Service de soins Intensifs
Matériel	Acier inoxydable / Plastique
Couleur des pièces en plastique	Bleu / Noir
Position des crochets	90° l'un de l'autre
Type de réglage en hauteur	à une seule main
Maximum Longueur/hauteur	2.290 mm
Minimum longueur/hauteur	1.540 mm
Diamètre du tube intérieur	Ø 25 mm
Diamètre du tube extérieur	Ø 33,7 mm
Longueur du tube extérieur	1.200 mm
Diamètre du bras	Ø 33,7 mm
Poids de la base	Avec poids
Diamètre de la base	Ø 680 mm
Roulettes	Roulettes d'appareil
Diamètre de roulette	Ø 75 mm
Nombre de roulettes	5 avec freins et conductivité électrique
Capacité de charge totale (kg)	13
Capacité de charge par système (kg)	8
Capacité de charge par crochet (kg)	2

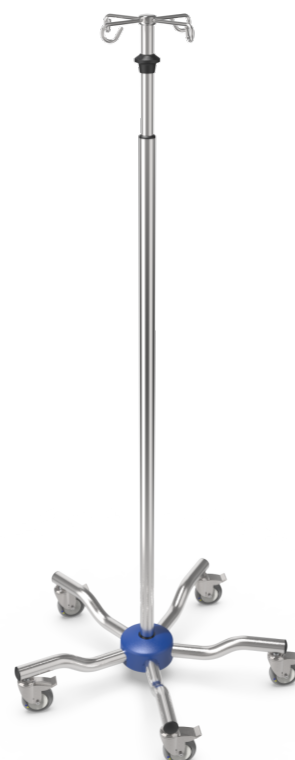

PACKAGING UNIT: PIÈCE

Width Box1	0,21 m
Height Box1	0,13 m
Length Box1	1,46 m
Weight Box1	12,50 kg



IV Stand Faible gravité



Domaine d'application

Le tube extérieur offre suffisamment d'espace pour fixer divers appareils à une hauteur de fonctionnement conviviale



Technique

Toutes les pièces en plastique sont résistantes à la lumière

Tubes en acier inoxydable selon DIN EN 10217-7

Le limiteur d'arrachement intégré empêche les tubes réglables de se séparer



Économie

L'emballage compact permet une expédition à faible coût



Sécurité

Les pieds de la base sont scellés avec des bouchons en plastique (aucun risque de blessure)

Faible risque de pincement lors de la rétraction et de l'extension de la potence IV grâce à la distance de sécurité intégrée

Aucun risque de blessure grâce à la forme arrondie des crochets à bouteilles

La géométrie des crochets empêche la chute du flacon de perfusion