

# Tige porte-sérum Premium Care

## Modèle robuste avec roulettes d'appareil

I-PRE013

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaine d'application	Service de soins Intensifs
Matériel	Acier inoxydable/ Plastique
Couleur des pièces en plastique	Noir
Nombre de crochets	4
Position des crochets	90° l'un de l'autre
Type de réglage en hauteur	Réglage de la hauteur par vis en acier inoxydable
Maximum Longueur/hauteur	2.260 mm
Minimum longueur/hauteur	1.430 mm
Diamètre du tube intérieur	Ø 25 mm
Diamètre du tube extérieur	Ø 33,7 mm
Longueur du tube extérieur	1.200 mm
Diamètre du bras	Ø 33,7 mm
Poids de la base	Avec poids
Diamètre de la base	Base en polyamide renforcé de fibre de verre
Diamètre de la base	Ø 655 mm
Roulettes	Roulettes d'appareil
Diamètre de roulette	Ø 75 mm
Nombre de roulettes	5 avec freins et conductivité électrique
Capacité de charge totale (kg)	35
Capacité de charge par système (kg)	20
Capacité de charge par crochet (kg)	5




Haute résilience  
jusqu'à 35 kg



Unité de palette  
jusqu'à 30 pièces



## Tige porte-sérum Premium Care

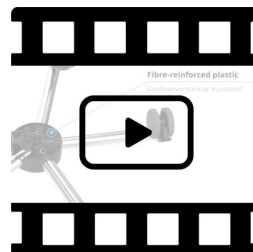

### Domaine d'application

Le tube extérieur offre suffisamment d'espace pour fixer divers appareils à une hauteur de fonctionnement conviviale



### Technique

Toutes les pièces en plastique sont résistantes à la lumière

Tubes en acier inoxydable selon DIN EN 10217-7

Matériau testé par ultrasons et courants de Foucault (selon EN 10246-9/3)

Le limiteur d'arrachement intégré empêche les tubes réglables de se séparer

Potence de sécurité selon DIN ISO 15375

Porte-bouteille renforcé permettant de suspendre 5 litres de solutions de rinçage

Résistance accrue à la corrosion grâce à la base en plastique renforcé de fibres de verre



### Économie

L'emballage compact permet une expédition à faible coût



### Sécurité

Les pieds de la base sont scellés avec des bouchons en plastique (aucun risque de blessure)

Faible risque de pincement lors de la rétraction et de l'extension de la potence IV grâce à la distance de sécurité intégrée

Les pieds de base cylindriques et polis réduisent la surface de dépôt de la saleté et des germes

Système Softdrop amortissant et contrôlant l'abaissement du tube intérieur

Aucun risque de blessure grâce à la forme arrondie des crochets à bouteilles

La géométrie des crochets empêche la chute du flacon de perfusion

