

Preguntas frecuentes – ICS

GENERALMENTE

1. ¿Cuál es la principal ventaja de un sistema montado en el techo?

+ Un sistema montado en el techo ofrece la principal ventaja de la distancia al suelo, lo que reduce los riesgos de tropiezos, mejora la higiene, facilita el acceso rápido al paciente y permite un uso variable.

2. ¿Qué diferentes sistemas de techo ICS ofrece Provita?

+ Distinguimos entre ICS 1, 2, 3 y 4, que puedes encontrar en nuestra web: [Sistemas de techo](#)

3. Cuando ntú siempre ¿Qué sistema?

+ La elección del sistema depende de la carga útil requerida, la flexibilidad deseada (variable o fija), la integración de la electricidad (ICS 3 y 4) y el suministro de gas existente en la pared.

4. ¿Qué accesorios están disponibles para los sistemas de techo ICS?

+ Hay varios accesorios disponibles para nuestros sistemas de techo ICS, que se pueden ver en nuestro sitio web: [Accesorios](#)

5. ¿Cómo se instalan los sistemas de techo ICS?

+ Para una instalación profesional tenemos una instrucción especial, que puede encontrar aquí: [Descargar IFU](#)

6. ¿Son los sistemas de techo ICS compatibles con los equipos médicos existentes?

+ Sí, siempre que estén equipados con garras en tubos redondos o raíles para equipos.

7. ¿Puedo consultar las referencias con antelación?

+ Sí, en nuestra web puedes ver varias Las imágenes de referencia se pueden ver: [Referencias](#)


Preguntas frecuentes – ICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INSTALACIÓN

8. ¿A qué tipos de techos puedo fijar los sistemas de techo ICS?

+ Los sistemas de techo se pueden instalar en diversos tipos de techo, incluidos falsos techos. Para una instalación segura, el montaje se realiza directamente en el plafón, garantizando así una instalación impecable y estable de los rieles y trípodes.

En el caso de falsos techos, los sistemas ICS1 e ICS2 se instalan mediante una subestructura especial que los une. Este sistema garantiza que las cargas se transfieran de forma segura al techo de soporte.

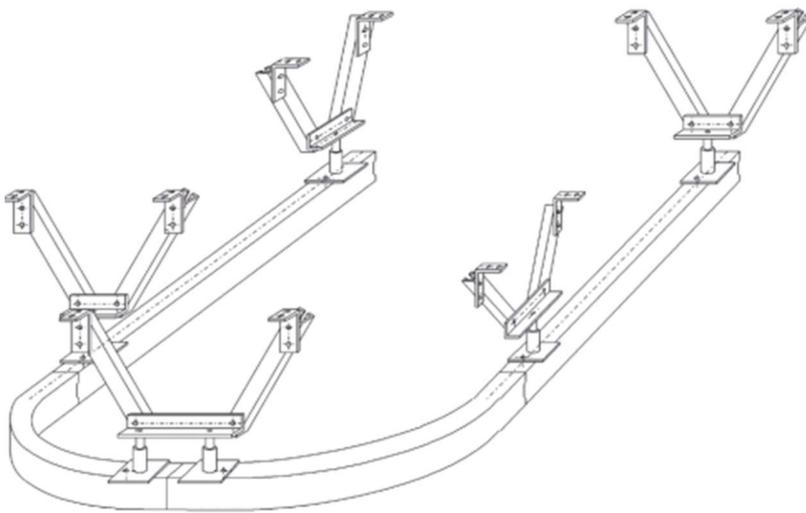


9. ¿Cuál es la altura mínima del techo requerida para la instalación?

+ Nuestro trípode estándar más pequeño es de 2,5 m, pero hay versiones personalizadas disponibles para satisfacer cualquier requisito del cliente.

Preguntas frecuentes – ICS

10. ¿Cómo se fijan los rieles del techo?

+ La fijación se realiza mediante tornillos que se atornillan a los techos, más información se puede encontrar en nuestranorteNotas de estática. - [Descargar IFU](#).

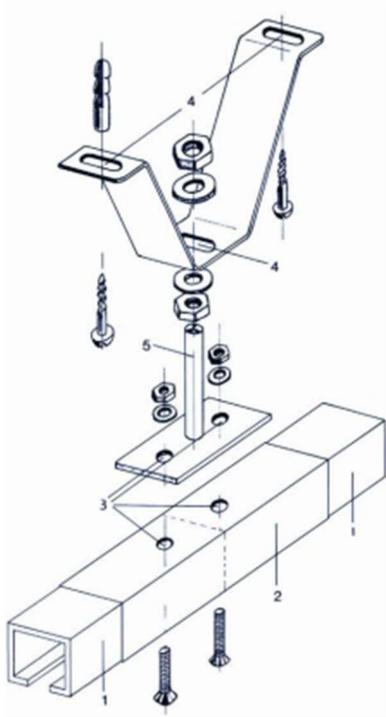

11. ¿Los sistemas de techo ICS pueden ampliarse o modificarse posteriormente?

+ Sí, los sistemas de techo ICS pueden ampliarse y/o modificarse posteriormente.

12. ¿Cuáles son los límites de carga de los modelos individuales de ICS?

+ Dependiendo del modelo ICS, hay una carga total/carga útil total diferente:

ICS 1 = máx. 50 kg/m | ICS 2 = hasta máx. 80 kg/m | ICS 3 = hasta máx. 40 kg/m | ICS 4 = hasta máx. 100 kg/m

13. ¿Existe una longitud máxima de riel o se pueden combinar varios rieles?

+ Puede servir Los rieles se pueden combinar entre sí para que sean adecuados para cualquier habitación.

Preguntas frecuentes – ICS

ÁREAS DE APLICACIÓN Y COMPATIBILIDAD

14. ¿Para qué estancias son adecuados los sistemas de techo ICS?

- + Los sistemas de techo ICS son adecuados para una variedad de habitaciones: salas de recuperación, unidades de cuidados intensivos, clínicas ambulatorias, es decir, cualquier lugar donde NO deba haber cosas en el suelo, y se pueden colgar de manera variable y móvil para dominar cada situación cotidiana.

15. ¿Puede ser útil también en los consultorios médicos?

- + Sí, absolutamente.

16. ¿Los sistemas de techo ICS están aprobados para unidades de cuidados intensivos?

- + Sí, encontrará información sobre el producto como MDR, UDI, que también incluye enlaces a instrucciones.

17. ¿Existen configuraciones estándar para áreas de uso específicas, como salas de emergencia, quirófanos o unidades de cuidados intensivos?

- + No, es posible, pero todos los deseos se pueden crear con nuestro configurador [-configurador provita](#)

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

18. ¿Qué mecanismos de seguridad están integrados en los sistemas de techo ICS?

- + Frenos, ganchos de seguridad y ajuste con una mano.

19. ¿Cómo se garantiza que no se supere la capacidad de carga?

- + El usuario/operador de los sistemas de techo ICS debe tener esto en cuenta.

20. ¿Qué trabajos de mantenimiento periódico son necesarios?

- + Encontrarás toda la información al respecto en el siguiente enlace: [Descargar IFU](#)

21. ¿Existe garantía para los sistemas de techo ICS?

- + Nuestros productos cuentan con la garantía legal habitual.

Preguntas frecuentes – ICS

INDIVIDUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN PERSONALIZADA

22. ¿Es posible suministrar los sistemas de techo ICS en tamaños personalizados?

+ Sí, todos los sistemas de techo ICS se fabrican y entregan según las especificaciones del cliente. Para crear un sistema óptimo y admisible, le invitamos a utilizar nuestro configurador en nuestro sitio web [configurador provita](http://configurador.provita)

23. ¿Es posible proporcionar soluciones o personalizaciones personalizadas?

+ Sí, es posible, ya sea con nuestro configurador o mediante plano. Sin embargo, para cumplir con las normas de seguridad vigentes, es necesario obtener nuestra aprobación por escrito.